

# ARMOIRE POSITIVE ATEX BLANCHE VITREE 346L



## Informations produit

- › Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- › Refroidissement ventilé Température réglable de +2°C à +15°C
- › Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- › Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- › Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en PS avec angles arrondis
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › Eclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- › 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
- › Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- › Fluide propre R-600a

## Avantages



**Photo  
non disponible**



### + Conformité ATEX intérieur et extérieur

Cuve sécurisée pour le stockage de produits volatiles non corrosifs, agréée ATEX II 3G Ex ec nC ic IIB T1-T6 Gc catégorie 3 zone 2, intérieur et extérieur conformément à la directive 2014/34/UE.

### + Performance

Système de diffusion d'air basé sur un évaporateur tubes/ailettes ventilé avec une gaine de diffusion sur toute la surface arrière de l'appareil pour une stabilité et homogénéité de température optimale de  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ .


### + Sécurité

- Alarmes visuelle et sonore pour température haute et basse et ouverture de porte prolongée.
- Report d'alarme par contact sec.

## Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L)	346	Grille acier plastifié (nb)	5
Volume utile (L)	312	Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Classe ATEX	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc	Nombre de niveaux max.	22 x 430 mm + 3 x 300 mm
Température (°C)	+2 °C á +15 °C	Hauteur de réglage (mm)	50
Refroidissement	Ventilé	Charge max admissible sur grille (kg)	40
Dégivrage	Automatique	Tiroirs aluminium télescopiques (en access oires) (nb max)	11 (P 430 mm) + 2 (P 300 mm)
Évaporateur	tubes/ailettes		
Condenseur	statique		
Carrosserie	Laqué blanc	DIMENSIONS ET POIDS	
Cuve	PS	Dimensions (LxPxH) (mm)	595x640x1901
Épaisseur d'isolation	50 mm	Cuve (LxPxH) (mm)	461x437x1229 + 461x315 x233
Type d'éclairage	LED	Poids net (kg)	80.4
Porte	Vitrée blanche	ALIMENTATION	
Inversion sens d'ouverture porte	Non	Tension (V)	230V (mono)
Rappel de porte automatique	Oui	Fréquence (Hz)	50
Serrure	Oui	Intensité (A)	0.79
Pieds inox	hauteur réglable 100-135 mm	Puissance électrique raccordée (W)	156
Fluide	R-600a	Dégagement calorifique (Wh/h)	52
Charge de gaz (g)	51	LOGISTIQUE	
Niveau sonore dB(A)	33.7	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
Contact sec	Oui	Poids brut (kg)	84
Thermostat de sécurité anti-congélation	Non		
COMMANDE			
Régulation	Électronique		
Affichage température	Digital 1K		
Réglage hygrométrie	Non		
Alarme température	visuelle et sonore		
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore		
Fonction HACCP	Oui		
Verrouillage de la commande	Oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES			
Classe climatique	+10°C à +32°C		
Consommation énergétique (kWh/24h)	1,32		
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	479		

## Schémas techniques

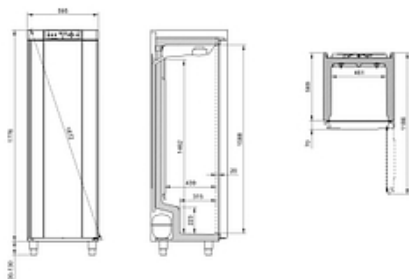

## Accessoires et options

### Accessoires

**GB430** Grille acier plastifié grande IIRR210/310/410

**GB300** Grille acier plastifié petite IIRR210/310/411