



Informations produit

- › Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme "Bonne Pratique de Laboratoire".
- › Refroidissement statique $-22^{\circ}\text{C} \pm 7^{\circ}\text{C}$.
- › Température réglable de -25°C à -5°C .
- › Dégivrage manuel.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
- › Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 60mm (injectée sans HFC).
- › Porte avec sens d'ouverture réversible et serrure en option.
- › Passage de cuve $\varnothing 15\text{mm}$ pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique.
- › Passage de cuve $\varnothing 30\text{mm}$ pour la qualification sur site, positionné sur la porte à 1/3 du haut.
- › Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 1°C .
- › Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
- › Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- › Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- › Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- › Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.
- › Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée.
- › Sauvegarde de la température mini et maxi.
- › Equipée de tiroirs transparents sur tablettes en verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace), charge max 24kg.
- › Fluide propre R-600a.

Avantages



+ Cartographie de contrôle

Afin de garantir les performances de stabilité et d'homogénéité de la température d'air à l'intérieur de l'enceinte, tous les appareils sont cartographiés suivant la procédure FDX15-140 à l'aide de 9 capteurs de températures à réaction rapide.



+ Régulation électronique COMFORT+

La commande électronique Comfort+ permet un réglage précis de la température au 1/10 de degré et embarque de nombreuses fonctionnalités pour garantir le plus haut niveau de sécurité. (voir page info complète)



+ Passage de cuve 15 mm

Pour faciliter la mise en place de capteurs et sondes de températures filaires, les appareils sont équipés d'origine d'un passage de cuve de diamètre 15 mm.



+ Relais d'alarme

Les enceintes sont équipées d'un contact sec sans potentiel permettant de relayer les états d'alarmes (panne de courant et alarmes de température) vers un système d'avertissement externe.



+ Passage de cuve 30 mm

La qualification sur site des enceintes réfrigérées suivant le référentiel FDX15-140 nécessite la mise en place de 9 capteurs de températures dans l'enceinte. Pour faciliter le passage des câbles et éviter de perturber la cartographie en utilisant le passage de porte, les enceintes sont équipées d'origine d'un passage de cuve de diamètre 30 mm positionné sur le coté ou sur la porte suivant le modèle.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L)	106
Volume utile (L)	103
Homogénéité de la température	-22°C ± 7°C
Température (°C)	-25°C à -5°C
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Évaporateur	périphérique
Condenseur	statique
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	ABS
Épaisseur d'isolation	60
Porte	Époxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Rappel de porte automatique	non
Serrure	En option
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	47
Niveau sonore dB(A)	39
Contact sec	oui

COMMANDE

Régulation	Électronique
Affichage température	digital 1°C
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Fonction HACCP	oui
Verrouillage de la commande	code PIN

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	7 (≤ +35°C @ 75%RH)
Consommation énergétique (kWh/24h)	0,45
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	164

ÉQUIPEMENTS

Tiroirs (nb)	4
Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)	360x375x135
Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)	360x230x140
Charge admissible sur évaporateurs (kg)	24

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	555x625x850
Cuve (LxPxH) (mm)	395x430x660
Poids net (kg)	42

ALIMENTATION


Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Puissance électrique raccordée (W)	100
Dégagement calorifique (Wh/h)	180

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	567x711x1051
Poids brut (kg)	44,5

¹appareil tête de série qualifié selon FD X15-140 - en température d'air pour une ambiance 22°C.
 Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.

Schémas techniques

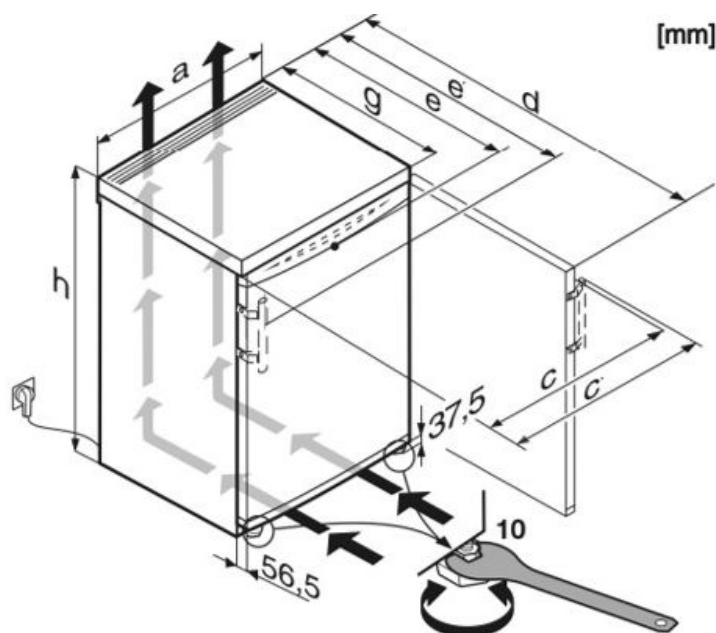

Modèle	h (mm)	a (mm)	g (mm)	e (mm)	e' (mm)	d (mm)	c (mm)	c' (mm)
LGP 1376	850	555	611	625	653	1129	563	592

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

Options

OP1/1 Serrure appareil 1 porte

OP12A Inversion du sens d'ouverture de porte (A)

OP14D Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - sur attente 1,5M